

Connected to

... REPRODUCTION BIOTECHNOLOGIES


α lpha

СОВЕРШЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ



- Высокая степень безопасности осеменения
- Атравматичный дизайн
- Экономия времени

Alpha

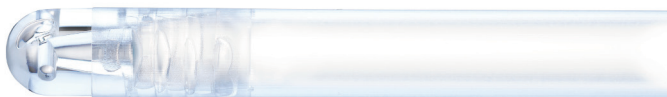

СОВЕРШЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ

Высокая степень безопасности осеменения

- Конструкция с куполообразной головкой обеспечивает оптимальное введение
- Улучшенная вставка соломинки, нет вытекания семени
- Прозрачный пластик, простота считывания маркировки соломинки, в том числе сквозь головку
- Подача семени через два боковых выходных канала, улучшение гигиеничности
- Прозрачность головки позволяет без затруднений наблюдать жидкости после выведения
- Улучшенное соединение препятствует отсоединению от осеменительного пистолета
- Упругость и эластичность помогают введению

Атравматичный дизайн

- Полированная куполообразная головка плавно проходит в шейку матки и через складки цервикального канала
- Атравматическая сверхгладкая поверхность

Экономия времени

- Вставка встроена в головку, быстрая загрузка
- Два боковых выходных канала обеспечивают надежное и равномерное введение семени
- Прозрачный пластик обеспечивает возможность сканирования штрихкода
- Неразрезной чехол. Совместим как со шприцом Kombicolor, так и со спиральным шприцом
- Универсальность позволяет использовать Alpha-чехол как с соломинками 0,5 мл, так и 0,25 мл.

Конструкция оптимизирована для осеменительного шприца Kombicolor

- Возможность введения семени на 4 см глубже в сравнении с другими шприцами
- Быстрое присоединение и снятие чехла
- Быстрая идентификация 5-ю разноцветными кольцами
- Универсальный: подходит для соломинок 0,25мл и 0,5мл
- Немагнитная нержавеющая сталь 304L 18/10 аустенитного типа обеспечивает долгие годы эксплуатации
- Простота очистки, повышающая гигиеничность



№ по кат. 024485

Упаковка в пакеты по 50 шт. Ящик на 1500 шт.

